

UniView™

Intelligente Anzeige der Datenaggregation und Alarmvisualisierung der nächsten Generation




- > UniView sammelt Daten und Alarmer von mehreren Masimo und Drittanbieter-Geräten, – wie z. B. Patientenmonitoren, Beatmungsgeräten, Narkoseapparaten, IV-Pumpen und anderen über Masimo Systeme angeschlossenen Geräten – auf einem zusätzlichen Display
- > Die integrierte Visualisierung von Echtzeitdaten reduziert die kognitive Überlastung und fördert den Datenaustausch zwischen mehreren Ärzten, damit sie Trends leichter erkennen und die Pflege koordinieren können
- > Visuelle Alarmanzeigen von angeschlossenen Geräten helfen Pflegeteams Patientennotfälle zu erkennen und den klinischen Fokus auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren
- > Angepasste anwendungsfall-spezifische Bildschirmlayouts optimieren die Darstellung von erweiterten und integrierten Parametern, Trenddaten und Kurven in Bereichen der Intensivmedizin
- > Anpassbare Layouts werden automatisch basierend auf den angeschlossenen Geräten neu konfiguriert

Maßgeschneiderte Bildschirm-Layouts

Anwendungsfallsspezifische Layouts ermöglichen Klinikern, die Patientendaten anzuzeigen, die für ein klinisches Versorgungsteam jeweils relevant sind

Übersichtslayout

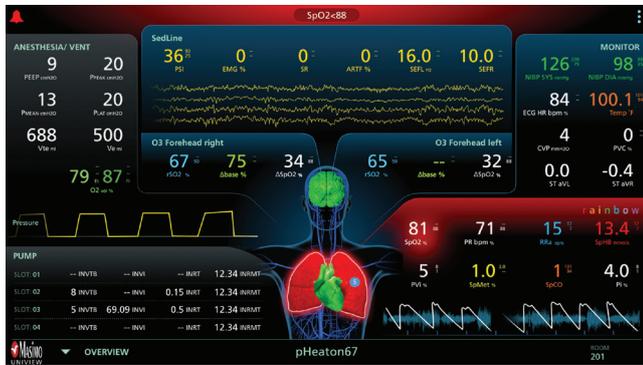


Das anpassbare Layout wird basierend auf den jeweils angeschlossenen Geräten neu konfiguriert, um die Anzeige der Parameterdaten, einschließlich Kurven und Alarme, für eine Übersicht über den Patientenzustand zu optimieren

Oxygenierungslayout



Zeigen Sie Kurven des Beatmungsgeräts zusammen mit Trenddaten für nicht invasive Hämoglobinmessungen (SpHb) und für die Sauerstoffsättigung (SpO2) an, um den Oxygenierungszustand des Patienten zu überwachen

Hämodynamisches Layout

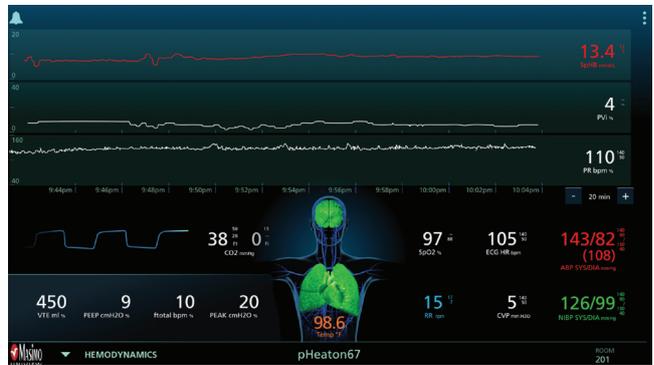

Zeigen Sie Trenddaten für nicht invasive Hämoglobinmessungen (SpHb®), Plethysmographie-Variabilitätsindex (PVI®) und Pulsfrequenz (PR) an, um den Zustand eines Patienten relativ zur Zeit leichter zu visualisieren

Sedierungslayout



Zeigen Sie Hi-Fi-EEG-Kurven, den Patient State Index (PSI) und Narkoseapparatdaten an, um die Tiefe der Anästhesie des Patienten zu überwachen

Bestellinformationen

	Teilenummer
UniView Mini-PC	9856
Erforderliche Masimo Systemkomponenten	
Patient SafetyNet™*	9095
Iris Gateway™	9712

* Die Marke „SafetyNet“ wird unter Lizenz von University HealthSystem Consortium verwendet.

ORi™ hat die CE-Kennzeichnung erhalten. Nicht in den USA verfügbar. ORi ist nicht für den Verkauf in Kanada lizenziert.

Zur professionellen Verwendung. Vollständige Verschreibungsinformationen einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

